



APL 400/404 Series

(APL 404 per l'opzione Co-Delivery)

Sono disponibili per il download versioni nelle lingue locali su

www.vivostat.com/qrcs


PARTE 1 – PREPARAZIONE DEL DISPOSITIVO APPLICATORE MONOUSO E DELL'UNITÀ APPLICATORE

Accendere l'unità applicatore sul retro e collegare il pedale




Evitare la formazione di bolle d'aria nella siringa


1. Inserire un ago 21g nel flacone pH 10, prelevare il liquido in una siringa da 1 ml

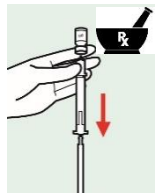


2. OPZIONALE: Preparare la soluzione Co-D. da co-applicare con Obsidian

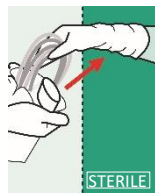


3. Trasferire l'applicatore monouso + carta tornasole nell'area sterile

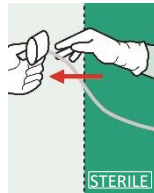

4. Rimuovere il portasiringhe dall'area sterile

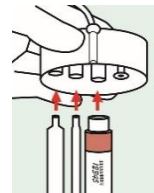


5. Inserire le siringhe con Obsidian, pH 10 e soluzione Co-D. opzionale nel portasiringhe

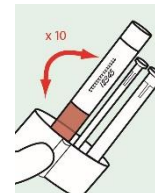


6. Capovolgere avanti e indietro il portasiringhe (x10)




7. Quando indicato sul display, aprire lo schermo

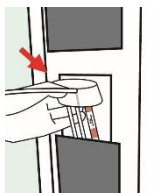

8. Inserire e posizionare il portasiringhe

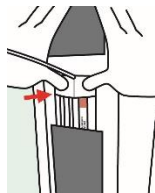

9. Premere il portasiringhe nella cavità usando due dita

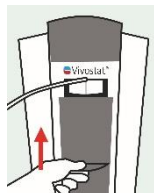

10. Chiudere lo schermo


ATTENZIONE:

- 1) Per evitare che bolle d'aria compromettano la miscela NON spingere l'ago in fondo al flacone pH 10 nel Punto 1
- 2) Seguire attentamente il Punto 6 per evitare che le piastrine si depositino sul fondo, perché sono essenziali per il processo di guarigione
- 3) Se passano +30 min dopo il Punto 6 capovolgere nuovamente il portasiringhe: premere il pulsante sulla sommità dell'unità applicatore per +4 s, estrarre il portasiringhe, ruotarlo, inserirlo nuovamente nella cavità premendo, chiudere lo schermo e premere il pulsante per +4 s.


PARTE 2 – CARICAMENTO DELLE SIRINGHE, ADESCAMENTO E INIZIO DELL'APPLICAZIONE




1. Premere il pulsante per avviare il caricamento delle siringhe

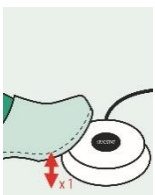

2. Premere il pedale una volta per adescare

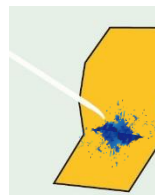


3. Puntare sull'angolo inferiore della carta tornasole mentre avviene l'adescamento automatico

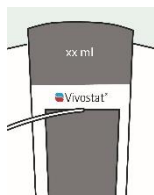

4. L'adescamento si arresta automaticamente e viene visualizzata la modalità spray + ml



5. Verificare che la miscela sia corretta sulla carta tornasole (da liquida a viscosa in 10-30 s)

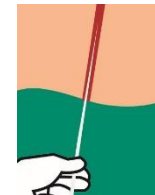

6. Pronto per l'applicazione, seguire le istruzioni del documento Applicazione di Obsidian® RFT

Per una guida all'applicazione, seguire le istruzioni del documento Applicazione di Obsidian® RFT incluso nella confezione.