



APL 400/404 Series

(APL 404 voor Co-Delivery (Gelijktijdige toediening)-optie)


Lokale taalversies kunnen worden gedownload op [www.vivostat.com/qrcs](http://www.vivostat.com/qrcs)

## DEEL 1 – DE WEGWERPAPPLICATOR EN DE APPLICATOREENHEID VOORBEREIDEN

Zet de applicatoreenheid AAN op de achterkant en sluit de voetschakelaar aan




**1.** Plaats de 21 g naald net in het pH 10-flesje, trek vloeistof op in de 1 ml-injectiespuit de 1 ml

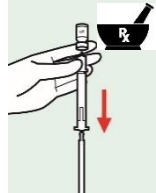


**2. OPTIONEEL:** Bereid de Co-D.-oplossing voor die samen met Obsidian moet worden toegepast




**3.** Breng de wegwerppapapplicator + pH-papier over naar het steriele veld

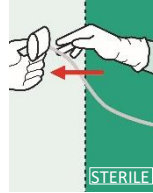

**4.** Breng de injectiespuit houder buiten het steriele veld

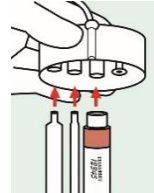


**5.** Plaats de injectiespuit met Obsidian, pH 10 en de optionele Co-D.-oplossing in de injectiespuit houder

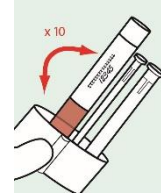


**6.** Draai de injectiespuit houder heen en weer (10x)




**7.** Open de afscherming wanneer dit wordt aangegeven op het display

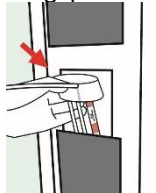

**8.** Plaats en positioneer de injectiespuit houder

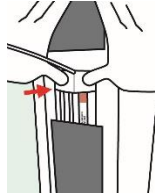

**9.** Druk de injectiespuit houder in de holte met twee vingers

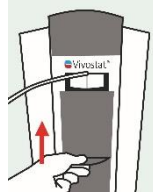

**10.** Sluit de afscherming


### LET OP:

- Om te voorkomen dat luchtballen het mengsel negatief beïnvloeden, dient u de naald NIET helemaal tot het einde in het pH 10-flesje te duwen in stap 1
- Volg stap 6 zorgvuldig zodat er geen bloedplaatjes neerslaan op de bodem, omdat deze essentieel zijn voor het genezingsproces
- Als er meer dan 30 min. verstreken zijn na stap 6, dient u de injectiespuit houder opnieuw te draaien: Houd de knop aan de bovenkant van de applicatoreenheid langer dan 4 seconden ingedrukt, haal de injectiespuit houder eruit, draai deze, duw de injectiespuit houder in de holte, sluit de afscherming en houd de knop langer dan 4 seconden ingedrukt


## DEEL 2 – INJECTIESPUITEN LADEN, VULLEN EN DE APPLICATIE STARTEN




**1.** Druk op de knop om te starten met het laden van injectiespuiten

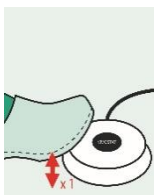

**2.** Druk eenmaal op de voetschakelaar om de spuiten te vullen

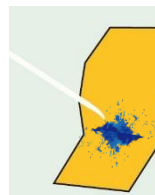


**3.** Richt de naald naar de onderste hoek van het pH-papier en voer de automatische vulprocedure uit

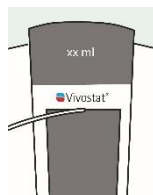

**4.** De automatische vulprocedure stopt automatisch en ml + spuitmodus wordt weergegeven



**5.** Controleer het correcte mengsel op pH-papier (van vloeibaar tot viskeus in 10-30 sec.)

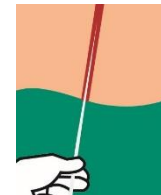

**6.** Gereed voor applicatie. Volg de aparte Obsidian® RFT Applicatie-instructie

Volg de aparte Obsidian® RFT Applicatie-instructie in de verpakking voor applicatierichtlijnen.