




APL 400


SCHNELLREFERENZ-KARTE (QRC) SPRAYPEN ANWENDUNGSKIT




TEIL 1 – EINWEGAPPLIKATOR UND APPLIKATOREINHEIT VORBEREITEN

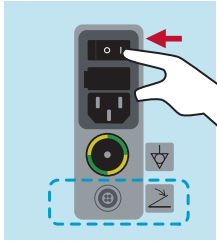


1. Gerät einschalten.
Optional:
Fußschalter
anschießen

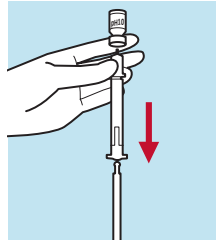


2. Die 21-g Nadel direkt
in das pH-10 Fläschchen
stecken und die
Flüssigkeit in eine 1-ml
Spritze aufziehen*

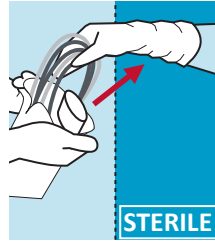


3. Einwegappli-
kator
+ pH Papier in einen
sterilen Bereich
bringen

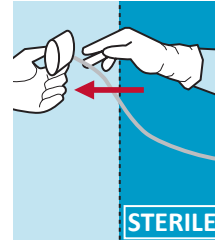


4. Spritzenhalter
aus dem sterilen
Bereich
entfernen

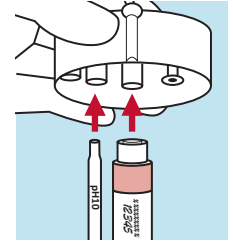


5. pH-10- und Kleber-
/Matrix-Spritzen in
den Spritzenhalter
einsetzen

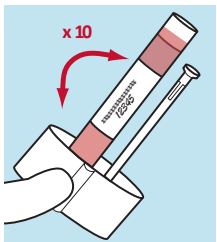


6. Für die Matrix:
Spritzenhalter 10 Mal
hin und her drehen*

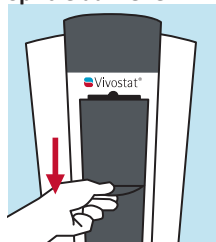


7. Wenn im Display
angezeigt, Schild
öffnen

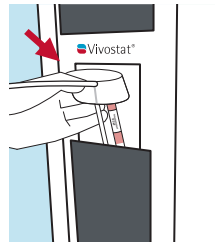

8. Spritzenhalter
einsetzen und
positionieren

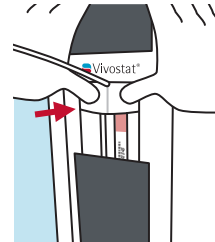


9. Spritzenhalter mit
zwei Fingern in die
Vertiefung drücken

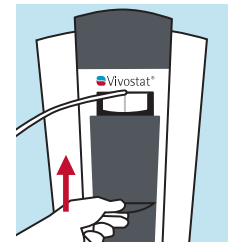

10. Schild schließen


TEIL 2 – SPRITZEN LADEN, ENTLÜFTEN UND DIE ANWENDUNG STARTEN

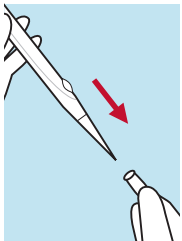


1. Kappe von
Spraypen
abnehmen




2. Taste drücken,
um das Laden
der Spritzen zu
starten

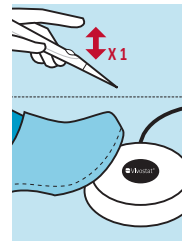

3. Zum Entlüften
einmal den
Fußschalter
drücken

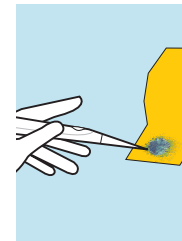


4. Spitze auf die
untere Ecke des
pH-Papiers richten
und Auto-priming
starten

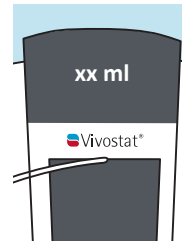

5. Auto-
priming stoppt
automatisch und
ml + Sprühmodus
wird angezeigt




6. Korrekte Mischung
auf pH-Papier
überprüfen (von
flüssig bis zähflüssig
in 10-30 Sek.)*

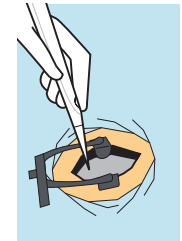


7. Bereit für die
Anwendung


ZUSÄTZLICHE ANWENDUNGSTIPPS

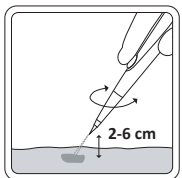


In einem
Sprühabstand
von 2-6 cm
kreisende
Bewegungen
ausführen

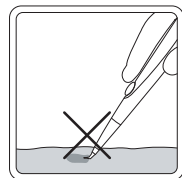


Gewebe **NICHT**
durchstechen
und Spraypen
Spitze nicht
verbiegen

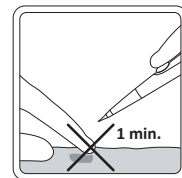

Berührung der
abgegebenen
Substanz
direkt nach der
Anwendung
vermeiden

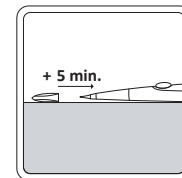

Bei
Unterbrechung
der Anwendung
von mehr als 5
Minuten Kappe
an Spraypen
anbringen

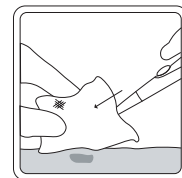

Kappe entfernen
und Spraypen
Spitze vor
der erneuten
Anwendung
abwischen

* VORSICHT:

1.2: Um zu vermeiden, dass sich Luftblasen negativ auf die Mischung auswirken, drücken Sie die Nadel **NICHT** bis zum Ende des pH 10-Fläschchens.

1.6: Befolgen Sie den Schritt sorgfältig, damit sich die Blutplättchen nicht am Boden absetzen, da sie für die Heilung wichtig sind. Wenn nach dem Drehen mehr als 30 Minuten vergangen sind, drehen Sie erneut: Drücken Sie den Knopf auf der Oberseite der Applikatoreinheit für 4 Sekunden, nehmen Sie den Spritzenhalter heraus, drehen Sie und folgen Sie den Schritten 1.6-1.10.

2.6: Wenn die Mischung nicht zähflüssig wird, drücken Sie den Knopf auf der Oberseite der Applikatoreinheit für +4 Sek. und überprüfen Sie, ob der Spritzenhalter richtig platziert ist und folgen Sie Schritt 1.6-1.10.

DIESE QRC MUSS IN VERBINDUNG MIT DER PRODUKT-IFU UND DEM MASCHINENHANDBUCH GELESEN WERDEN. Für IFUs und Handbücher, QRC-Sprachversionen und vieles mehr besuchen Sie bitte unsere Website: www.vivostat.com/application-now



Vivostat A/S
Borupvang 2
3450 Allerød
Dänemark

+45 8880 8400
info@vivostat.com
www.vivostat.com