




APL 400


# SNELLE REFERENTIEKAART (QRC) SPRAYPEN APPLICATIEKIT

# Vivostat®


## DEEL 1 – DE WEGWERPAPPLICATOR EN DE APPLICATOREENHEID VOORBEREIDEN

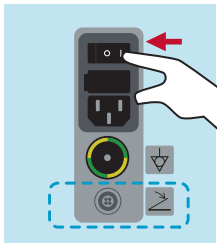


1. Zet de applicator-eenheid AAN. Optioneel: voetschakelaar aansluiten

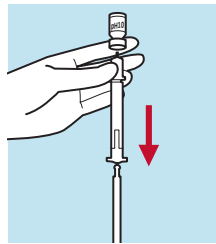


2. Plaats de 21 g naald net in het pH 10-flesje, trek vloeistof op in de 1 ml-injectiespuit\*

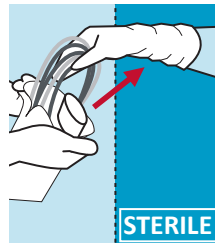


3. Breng de wegwerpapplicator + pHpapier over naar het steriele veld

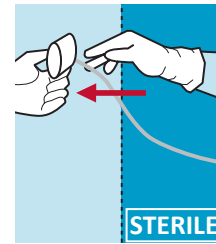


4. Breng de injectiespuithouder buiten het steriele veld

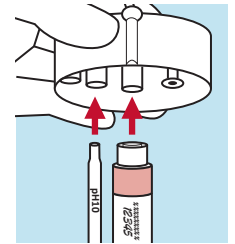


5. Plaats pH 10- en sealant/ matrix-sputen in spuithouder

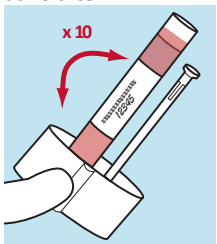


6. Voor matrix: draai de injectiespuithouder x 10 keer heen en weer\*

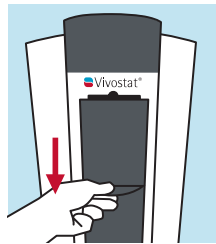


7. Open de beschermkap wanneer dit wordt aangegeven op het display

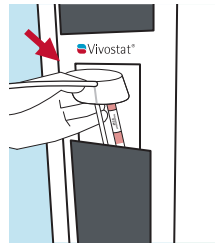

8. Plaats en positioneer de injectiespuithouder

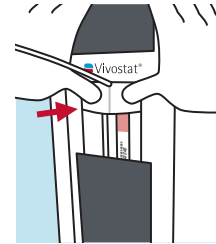


9. Druk de injectiespuithouder in de holte met twee vingers

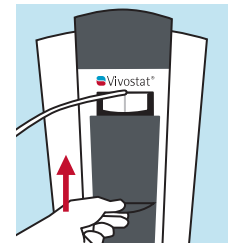

10. Sluit de beschermkap


## DEEL 2 – INJECTIESPUITEN LADEN, VULLEN EN DE APPLICATIE STARTEN

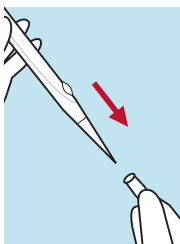


1. Verwijder de dop van de Spraypen




2. Druk op de knop om te starten met het laden van injectiesputen

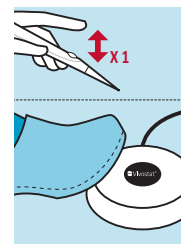

3. Druk eenmaal op de Spraypen knop of de voetschakelaar om de spuit te vullen

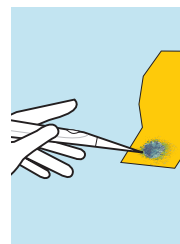


4. Richt de naald naar de onderste hoek van het pHpapier en voer de automatische vulprocedure uit

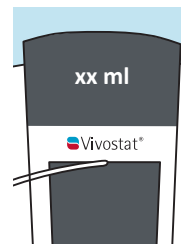

5. De automatische vulprocedure stopt automatisch en ml + spuitmodus wordt eergegeven




6. Controleer het correcte mengsel op pH-papier (van vloeibaar tot viskeus in 10-30 sec.)\*

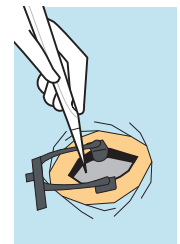


7. Gereed voor applicatie


## AANVULLENDE TIPS VOOR HET AANBRENGEN

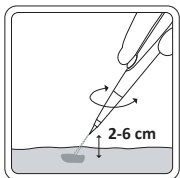


Gebruik cirkelvormige bewegingen op een spuitafstand van 2-6 cm

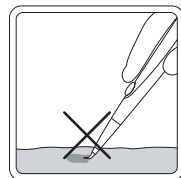


Prik NIET in weefsel en buig de punt van de Spraypen niet

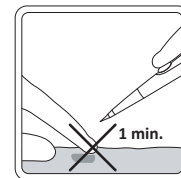

Vermijd het aanraken van de aangebrachte stof onmiddellijk na het aanbrengen

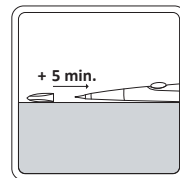

Als het aanbrengen +5 minuten wordt onderbroken, plaatst u de dop op de Spraypen

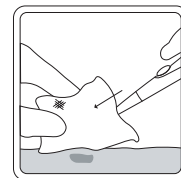

Verwijder de dop en veeg de punt van de Spraypen schoon voordat u de stof opnieuw aanbrengt

## \* LET OP:

1.2: Duw de naald NIET tot het uiteinde van de pH 10 flacon om te voorkomen dat luchtballen het mengsel negatief beïnvloeden.

1.6: Volg stap zorgvuldig om te voorkomen dat bloedplaatjes zich op de bodem afzetten. Ze zijn essentieel voor genezing. Als er +30 min. voorbij zijn na het roteren, opnieuw roteren: druk op de knop bovenop de Applicator Unit voor +4 sec., neem de spuithouder eruit, roter en volg stap 1.6-1.10.

2.6: Als het mengsel niet viskeus wordt, druk dan +4 sec. op de knop bovenop de Applicator Unit en controleer of de spuithouder goed geplaatst is en volg stap 1.6-1.10.

DEZE QRC MOET GELEZEN WORDEN IN CONJUNCTIE MET DE IFU VAN HET PRODUCT EN DE MACHINEHANDLEIDING.

Ga voor IFU's en handleidingen, QRC-taalversies en nog veel meer naar onze website: [www.vivostat.com/application-now](http://www.vivostat.com/application-now)



CE 0477



Vivostat A/S  
Borupvang 2  
3450 Allerød  
Denemarken

+45 8880 8400  
[info@vivostat.com](mailto:info@vivostat.com)  
[www.vivostat.com](http://www.vivostat.com)