




APL 400


CARTÃO DE CONSULTA RÁPIDA (QRC) SPRAYPEN KIT DE APLICAÇÃO

Vivostat®


PARTE 1 – PREPARAR O DISPOSITIVO APLICADOR E A UNIDADE APLICADOR

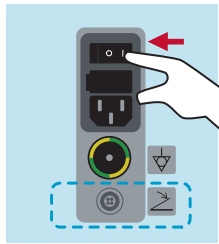


1. Ligar a unidade.
Opcional: ligar o interruptor do pedal

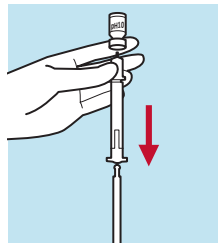


2. Introduza uma agulha de 21 g no interior do frasco de pH 10; recolha o líquido para uma seringa de 1 ml*

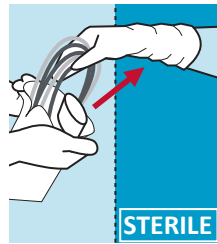


3. Transfira o aplicador descartável + papel de pH para área estéril

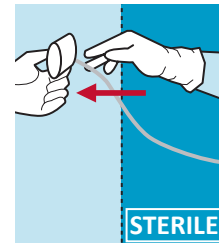


4. Transfira o suporte de seringa para fora da área estéril

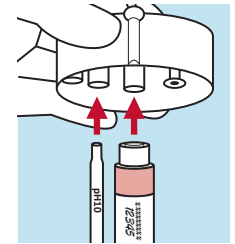


5. Inserir as seringas de pH 10 e de selante/matriz no suporte de seringas

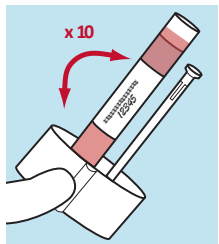


6. Para a matriz: rodar o suporte da seringa para a frente e para trás 10 vezes*

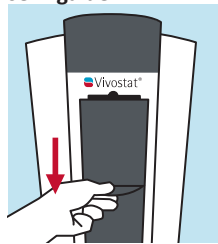


7. Quando indicado no visor, abra a tampa

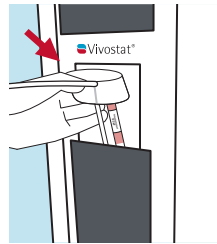

8. Insira e posicione o suporte de seringas

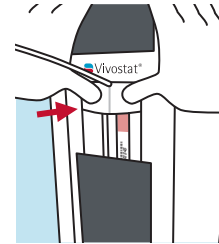


9. Pressione o suporte de seringas na cavidade utilizando dois dedos

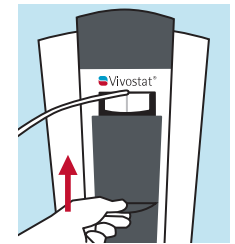

10. Feche a tampa


PART 2 – CARREGAR SERINGAS, IRRIGAR E INICIAR A APLICAÇÃO

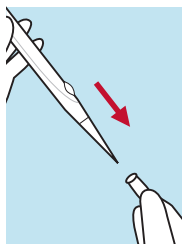


1. Retire a tampa da Spraypen




2. Pressione o botão para iniciar o carregamento de seringas

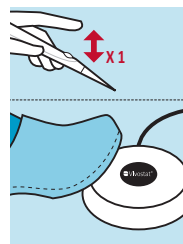

3. Pressione o botão da Spraypen ou o interruptor de pedal uma vez para irrigar

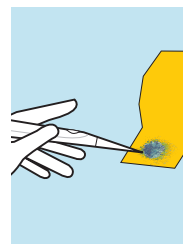


4. Aponte para o canto inferior do papel de pH e proceda à autoirrigação

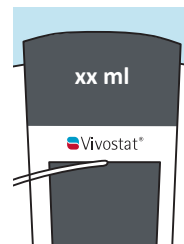

5. Autoirrigação para automaticamente e é exibido o modo de pulverização "ml +"




6. Verifique a mistura correta no papel de pH (de líquida a viscosa em 10-30 segundos)*

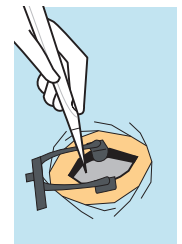


7. Pronto para aplicação


DICAS DE APLICAÇÃO

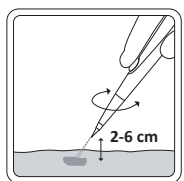


Utilize movimentos circulares a uma distância do spray de 2 a 6 cm

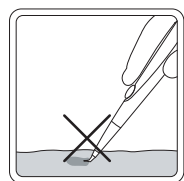


Não introduza no tecido nem dobre a ponta da Spraypen

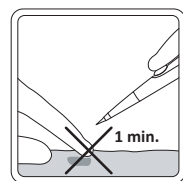

Evite tocar na substância aplicada imediatamente após a aplicação

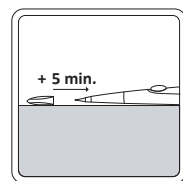

Se interromper a aplicação durante mais de 5 minutos, coloque a tampa na Spraypen

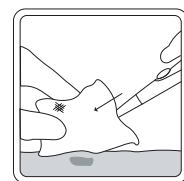

Remova a tampa e limpe a ponta da Spraypen antes de reaplicar

* ATENÇÃO:

1.2: De modo a evitar que bolhas de ar afetem negativamente a mistura, **NÃO** empurre a agulha até ao fim do frasco de pH 10.

1.6: Siga cuidadosamente o passo para que as plaquetas não se depositem no fundo, pois são essenciais para a cicatrização. Se passarem +30 min. após a rotação, rodar novamente: premir o botão na parte superior da unidade aplicadora durante +4 seg., retirar o suporte da seringa, rodar e seguir os passos 1.6-1.10.

2.6: Se a mistura não ficar viscosa, premir o botão na parte superior da unidade do aplicador durante +4 seg., verificar se o suporte da seringa está corretamente colocado e seguir o passo 1.6-1.10.

ESTE QRC DEVE SER LIDO EM CONJUNÇÃO COM AS IFU DO PRODUTO E O MANUAL DO UTILIZADOR.
Para consultar as instruções de utilização e os manuais, as versões linguísticas do QRC e muito mais, visite o nosso sítio Web: www.vivostat.com/application-now



CE
0477



Vivostat A/S
Borupvang 2
3450 Allerød
Dinamarca

+45 8880 8400
info@vivostat.com
www.vivostat.com