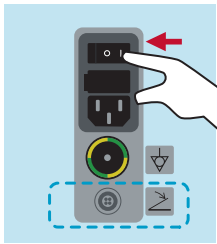
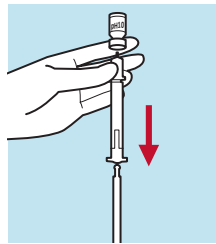
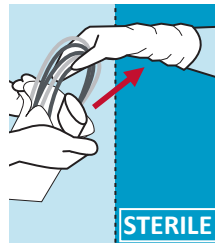
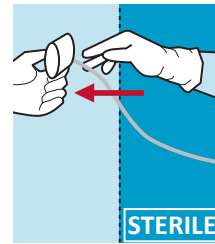
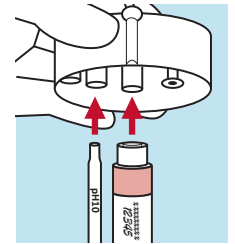
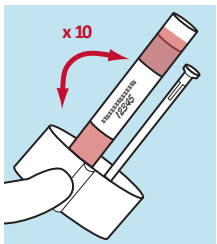
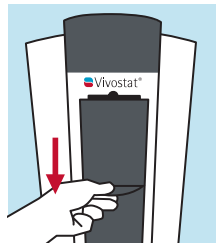
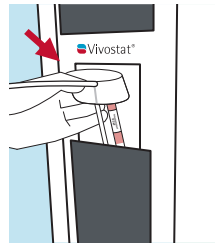
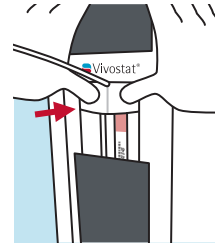
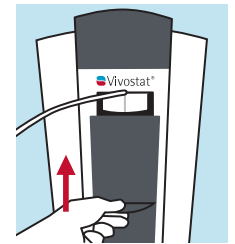
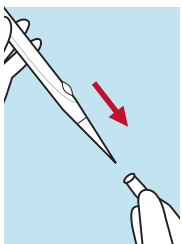
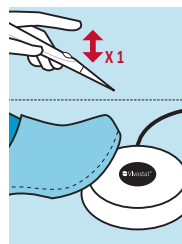
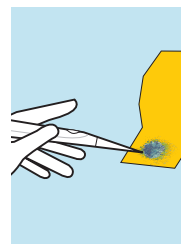
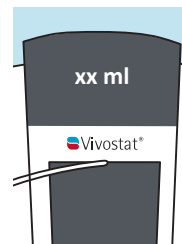
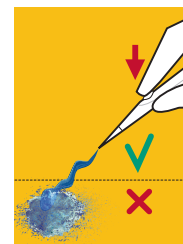
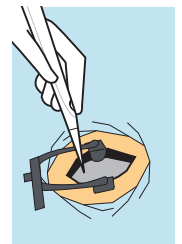
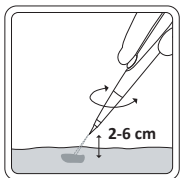
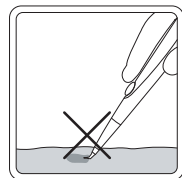
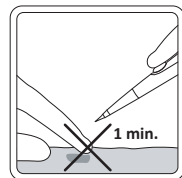
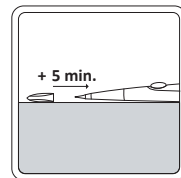
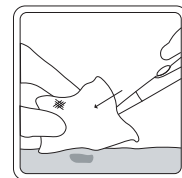


**APL 400****SNABBREFERENSGUIDE (QRC)
SPRAYPEN APPLIKATIONSSATS****Vivostat®****DEL 1 – FÖRBERED ENGÅNGSAPPLIKATIONSSATS OCH APPLIKATOR****1. Slå PÅ enheten.**
Tillval: anslut
fotpedalen**2. Placera 21g nål
precis inuti pH 10
flaskan, dra upp
vätska i 1 ml spruta*****3. Överför
engångsapplicator
+ pH-papper till ett
sterilt område****4. Flytta
spruthållaren från
det sterila området****5. Sätt in pH 10
och fibrinlim/
matris-sprutor i
spruthållaren****6. För matris: vrid
spruthållaren fram
och tillbaka 10
gångar*****7. Öppna skärmen
när det indikeras i
displayen****8. Sätt i och placera
spruthållaren****9. Tryck in
spruthållaren i
håligheten med hjälp
av två fingrar****10. Stäng skärmen****DEL 2 – LADDA SPRUTOR, PRIMA OCH INITIERA APPLICERING****1. Ta av locket på
Spraypen****2. Tryck på
knappen för
att börja ladda
sprutor****3. Tryck på
knappen *eller*
fotpedalen till
Spraypen *en gång*
för att prima****4. Peka på det
nedre hörnet av
pH-pappret och
autoprimera****5. Autoprimering
stoppas
automatiskt och
ml + sprayläge
visas****6. Verifiera korrekt
blandning på
pH-papper (från
flytande till viskös
på 10–30 sek.)*****7. Färdig för
applicering****YTTERLIGARE TIPS FÖR ANVÄNDNING****Använd cirkulära
rörelser med ett
avstånd på 2-6
cm****Peta *INTE* i
vävnaden och böj
inte spetsen på
Spraypen****Undvik att
röra vid det
applicerade
ämnet
omedelbart efter
appliceringen****Om du pausar
appliceringen i
mer än 5 minuter
ska du sätta
på locket på
Spraypen****Avlägsna locket
och torka av
spetsen på
Spraypen innan
du använder den
på nytt***** FÖRSIKTIGHET:****1.2:** För att undvika att luftbubblor påverkar blandningen negativt ska du **INTE** föra in nålen i slutet av pH 10-flaskan.**1.6:** Följ steget noggrant för att blodplättar inte ska sedimentera i botten, de är viktiga för läkning. Om +30 min. passerar efter rotation, rotera igen: tryck på knappen på toppen av applicatorenheten i +4 sek, ta ut spruthållaren, rotera och följ steg 1.6-1.10.**2.6:** Om blandningen inte blir viskös, tryck på knappen på toppen av applicatorenheten i +4 sek. och kontrollera att spruthållaren är korrekt placerad och följ steg 1.6-1.10.**DENNA QRC MÅSTE LÄSAS I SAMBAND MED
PRODUKTENS IFU OCH MASKINENS MANUAL.**För IFU:er och manualer, QRC-språkversioner och mycket mer,
besök vår webbplats: www.vivostat.com/application-now**CE**
0477Vivostat A/S
Borupvang 2
3450 Allerød
Danmark+45 8880 8400
info@vivostat.com
www.vivostat.com