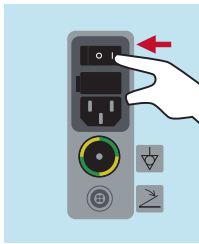
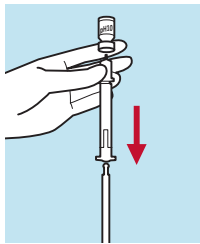
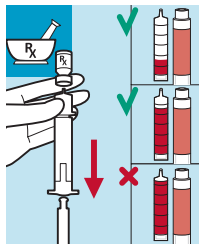
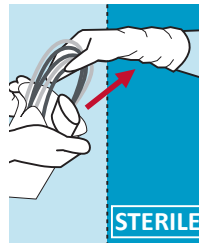
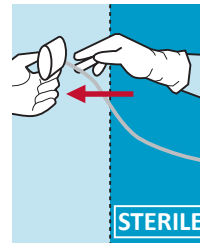
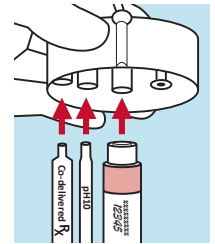
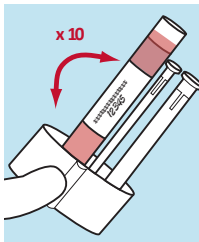
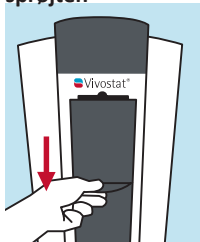
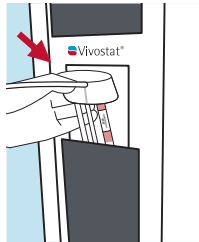
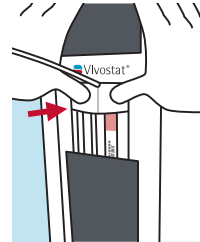
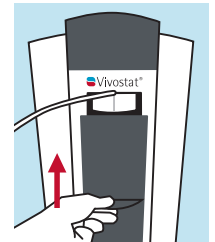
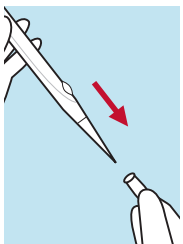
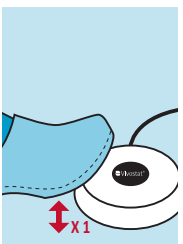
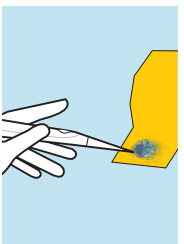
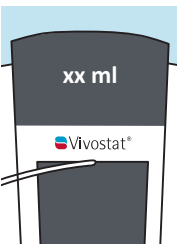
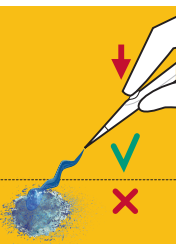
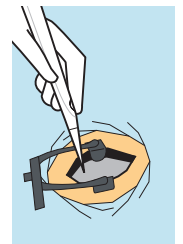
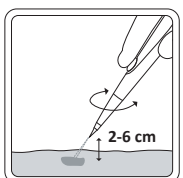
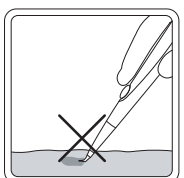
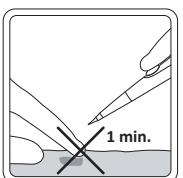
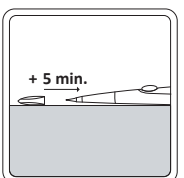
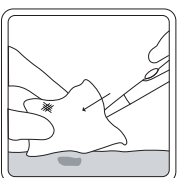


**APL 404****QUICK REFERENCE CARD
SPRAYPEN APPLICATION KIT – CO-DELIVERY****Vivostat®****DEL 1 – FORBERED ENGANGSAPPLIKATORENHEDEN OG APPLIKATOREN****1. Tænd applikator og tilslut fodpedal****2. Placer 21G nålen lige indenfor pH 10 hætte-glasset, træk væske ind i 1 ml sprøjten*****3. Forbered Co-Delivery-opløsning til mindre eller lig med klæber/matrix****4. Overfør engangs-applikatoren + pH-papiret til det sterile område****5. Overfør sprøjteholderen ud af det sterile område****6. Sæt pH 10, klæber/matrix og Co-Delivery-sprøjterne i sprøjteholderen****7. Hvis matrix: Drej sprøjteholderen frem og tilbage 10 gange*****8. Når det angives i displayet, åbnes lågen****9. Indsæt og placer sprøjteholderen****Ved brug af APL 404 uden co-delivery: sørg for, at pH10-sprøjten er placeret lige og ikke i co-delivery-kaviteten****10. Tryk sprøjteholderen ind i åbningen med to fingre****11. Luk lågen****DEL 2 – ISÆT SPRØJTERNE, FYLD, OG START APPLIKATIONEN****1. Tag hættten af Spraypen****2. Tryk på knappen for at begynde isætning af sprøjterne****3. Tryk én gang på fodpedalen for at starte****4. Peg mod det nederste hjørne af pH-papiret under auto-opstarten****5. Autoopstarten stopper automatisk, og ml + sprøjte-funktion vises****6. Kontroller korrekt blanding på pH-papir (fra flydende til tyktflydende på 10-30 sek.)*****7. Klar til anvendelse****YDERLIGERE BRUGSTIPS****Brug cirkelformede bevægelser, og sprøjt i en afstand af 2-6 cm****Sprøjt IKKE vævet, og bøj ikke Spraypens spids****Undgå af røre ved det påførte stof umiddelbart efter påføringen****Hvis påføringen standses i mere end 5 minutter, sættes hættten på Spraypen****Fjern hættten og tør Spraypens spids af, før der påføres igen***** FORSIGTIG:****1.2:** For at undgå luftbobler, der kan påvirke blandingen negativt, må nålen **IKKE** skubbes helt ind i pH 10 hætteglasset.**1.7:** Følg trinnet omhyggeligt, så blodpladerne ikke lægger sig i bunden, da de er vigtige for helingen. Hvis der går +30 minutter efter rotation, skal du rotere igen: Tryk på knappen øverst på applikatorenheden i +4 sekunder, tag sprøjteholderen ud, rotér og følg trin 1.7-1.11.**2.6:** Hvis blandingen ikke bliver tyktflydende, skal du trykke på knappen øverst på applikatorenheden i +4 sek. og kontrollere, at sprøjteholderen er placeret korrekt, og følge trin 1.7-1.11.**DENNE QRC SKAL LÆSES I SAMMENHÆNG MED PRODUKT IFU OG MASKINMANUAL.**For IFU'er og manualer, QRC sprog versioner og meget mere, besøg vores website: www.vivostat.com/application-now**CE**
0477Vivostat A/S
Borupvang 2
3450 Allerød
Danmark+45 8880 8400
info@vivostat.com
www.vivostat.com