




APL 404


SCHNELLREFERENZ-KARTE (QRC) SPRAYPEN ANWENDUNGSKIT – CO-DELIVERY




TEIL 1 – EINWEGAPPLIKATOR UND APPLIKATOREINHEIT VORBEREITEN

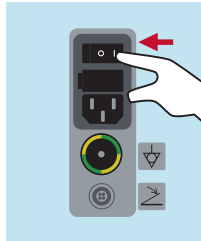


1. Gerät einschalten und Fußschalter anschließen

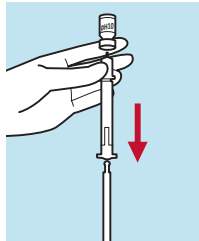


2. Die 21g-Nadel direkt in das pH-10-Fläschchen stecken und die Flüssigkeit in eine 1-ml-Spritze aufziehen*

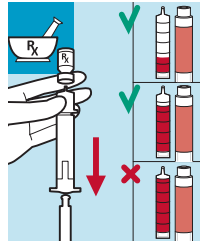


3. Bereiten Sie die Co-Delivery-Lösung so vor, dass sie kleiner oder gleich der Kleber/Matrix ist

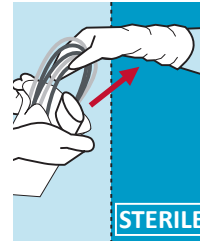


4. Einwegapplikator + pH-Papier in einen sterilen Bereich bringen

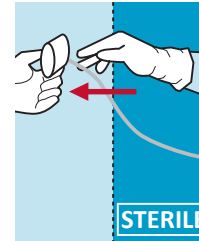


5. Spritzenhalter aus dem sterilen Bereich entfernen

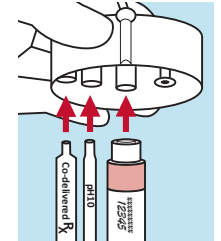


6. pH-10- und Kleber-/Matrix-Spritzen in den Spritzenhalter einsetzen

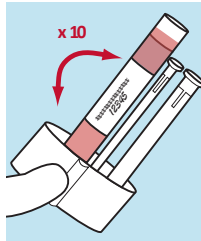

7. Für die Matrix: Spritzenhalter 10 Mal hin und her drehen*

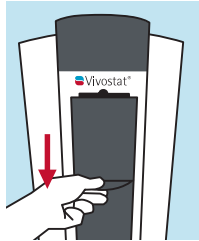


8. Wenn im Display angezeigt, Schild öffnen

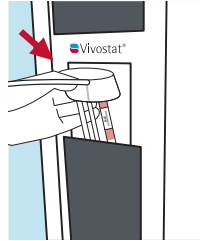


9. Spritzenhalter einsetzen und positionieren

Verwendung der APL 404 ohne Co-Delivery:
Achten Sie darauf, dass die pH10-Spritze gerade und nicht in der Co-Delivery-Kavität positioniert ist.

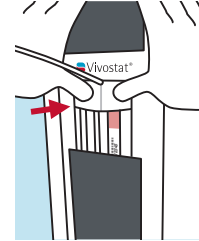


10. Spritzenhalter mit zwei Fingern in die Vertiefung drücken

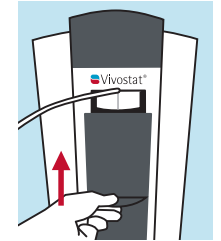

11. Schild schließen


TEIL 2 – SPRITZEN LADEN, ENTLÜFTEN UND DIE ANWENDUNG STARTEN

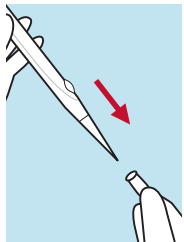


1. Kappe von Spraypen abnehmen




2. Taste drücken, um das Laden der Spritzen zu starten

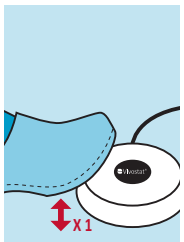


3. Zum Entlüften einmal den Fußschalter drücken

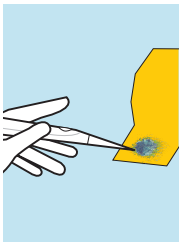


4. Spitze auf die untere Ecke des pH-Papiers richten und Autopriming starten

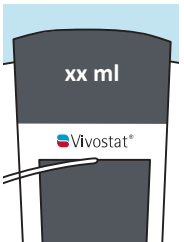

5. Auto-priming stoppt automatisch und ml + Sprühmodus wird angezeigt

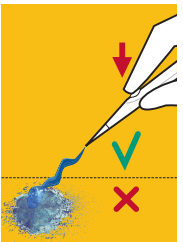


6. Korrekte Mischung auf pH-Papier überprüfen (von flüssig bis zähflüssig in 10-30 Sek.)*

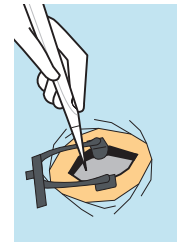


7. Bereit für die Anwendung


ZUSÄTZLICHE ANWENDUNGSTIPPS

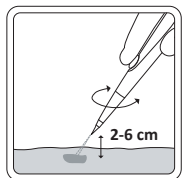


In einem Sprühabstand von 2-6 cm kreisende Bewegungen ausführen

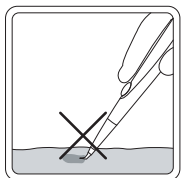


Gewebe NICHT durchstechen und Spraypen Spitze nicht verbiegen

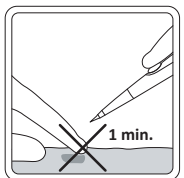

Berührung der abgegebenen Substanz direkt nach der Anwendung vermeiden

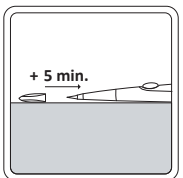

Bei Unterbrechung der Anwendung von mehr als 5 Minuten Kappe an Spraypen anbringen

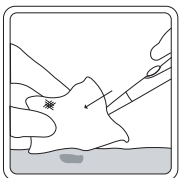

Kappe entfernen und Spraypen Spitze vor der erneuten Anwendung abwischen

* VORSICHT:

1.2: Um zu vermeiden, dass sich Luftblasen negativ auf die Mischung auswirken, drücken Sie die Nadel **NICHT** bis zum Ende des pH 10-Fläschchens.

1.7: Befolgen Sie den Schritt sorgfältig, damit sich die Blutplättchen nicht am Boden absetzen, da sie für die Heilung wichtig sind. Wenn nach dem Drehen mehr als 30 Minuten vergangen sind, drehen Sie erneut: Drücken Sie den Knopf auf der Oberseite der Applikatoreinheit für 4 Sekunden, nehmen Sie den Spritzenhalter heraus, drehen Sie und folgen Sie den Schritten 1.7-1.11.

2.6: Wenn die Mischung nicht zähflüssig wird, drücken Sie den Knopf auf der Oberseite der Applikatoreinheit für +4 Sek. und überprüfen Sie, ob der Spritzenhalter richtig platziert ist und folgen Sie Schritt 1.7-1.11.

DIESE QRC MUSS IN VERBINDUNG MIT DER PRODUKT-IFU UND DEM MASCHINENHANDBUCH GELESEN WERDEN. Für IFUs und Handbücher, QRC-Sprachversionen und vieles mehr besuchen Sie bitte unsere Website: www.vivostat.com/application-now



Vivostat A/S
Borupvang 2
3450 Allerød
Dänemark

+45 8880 8400
info@vivostat.com
www.vivostat.com