




APL 404

FICHE AIDE-MÉMOIRE (QRC)


KIT D'APPLICATION DE SPRAYPEN – CO-DELIVERY

Vivostat®


PHASE 1 – PRÉPARATION DU DISPOSITIF D'APPLICATION JETABLE ET DE L'UNITÉ D'APPLICATION

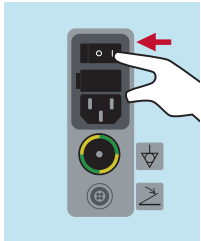


1. Mettre l'appareil en marche et brancher l'interrupteur au pied

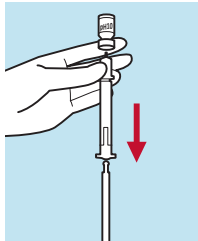


2. Placer l'aiguille 21 G juste à l'intérieur du flacon de pH 10, prélever le liquide dans une seringue de 1ml*

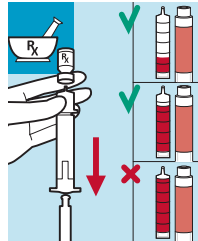


3. Préparer la solution de co adm. dans le à un niveau inférieur ou égal à celui du colle/matrice

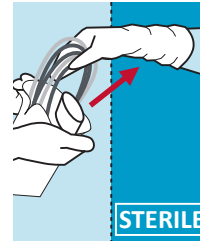


4. Transférer l'applicateur jetable et le papier pH sur le champ stérile

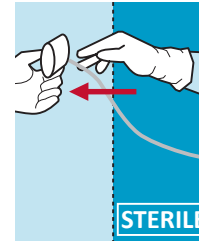


5. Sortir le porteseringues du champ stérile

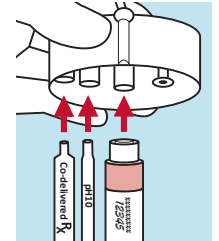


6. Insérer les seringues de pH 10, de colle/matrice et de co-délivrance dans le porte-seringue

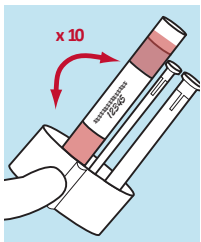

7. Pour la matrice : faire pivoter le porteseringues dans un mouvement de va-et-vient 10 fois*

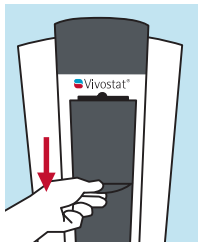


8. Lorsque l'écran l'indique, ouvrir la protection

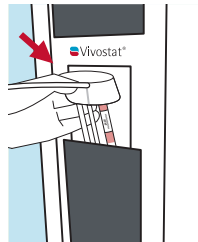


9. Insérer et bien positionner le porteseringues

Utilisation de l'APL 404 sans co-délivrance : veiller à ce que la seringue de pH10 soit bien droite et ne se trouve pas dans la cavité de co-adm.

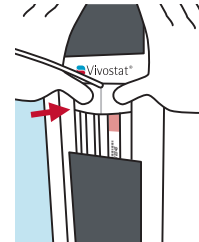


10. Enfoncer le porteseringues dans son logement avec deux doigts

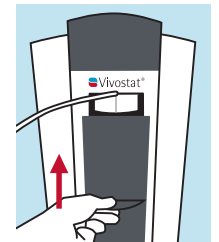

11. Fermer la protection


PHASE 2 – CHARGEMENT DES SERINGUES, AMORÇAGE ET DÉMARRAGE DE L'APPLICATION

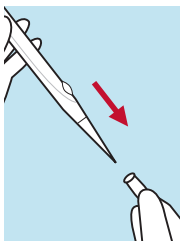


1. Retirer le capuchon du Spraypen




2. Appuyer sur le bouton pour démarrer le chargement des seringues

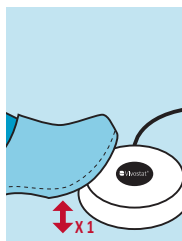

3. Appuyer sur le bouton du Spraypen ou sur l'interrupteur au pied une fois pour amorcer

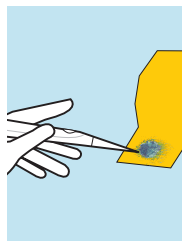


4. Diriger l'écoulement sur l'angle inférieur du papier pH et laisser l'amorçage automatique s'effectuer

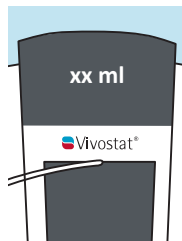

5. L'amorçage automatique s'arrête ; les ml et le mode de pulvérisation sont affichés




6. Vérifier que le mélange est correct sur le papier pH (de liquide à visqueux en 10 à 30 s)*

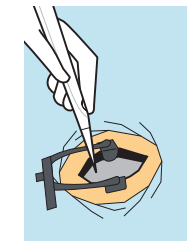


7. Le produit est prêt à l'application


CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES POUR L'APPLICATION

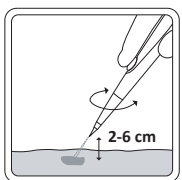


Procéder par mouvements circulaires à une distance de pulvérisation de 2 à 6 cm

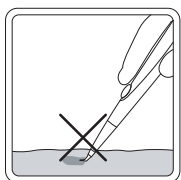


Ne PAS piquer les tissus ni plier la pointe du Spraypen

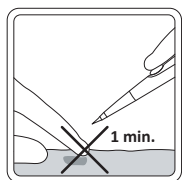

Éviter de toucher la substance pulvérisée immédiatement après l'application

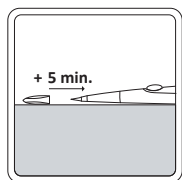

En cas d'interruption de plus de 5 minutes de l'application, remettre le capuchon sur le Spraypen

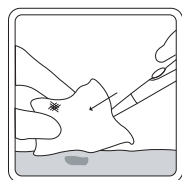

Retirer le capuchon et essuyer la pointe du Spraypen avant de reprendre l'application

* ATTENTION:

1.2: Pour éviter que les bulles d'air aient un impact négatif sur le mélange, NE PAS pousser l'aiguille jusqu'à l'extrémité du flacon de pH 10.

1.7: Suivre attentivement l'étape pour que les plaquettes ne se déposent pas au fond du flacon, car elles sont essentielles à la cicatrisation. Si +30 minutes se sont écoulées après la rotation, effectuer une nouvelle rotation ; appuyer sur le bouton situé sur le dessus de l'Applicateur pendant +4 secondes, retirer le porte-seringue, effectuer une nouvelle rotation et suivre les étapes 1.7-1.11.

2.6: Si le mélange ne devient pas visqueux, appuyer sur le bouton situé en haut de l'unité d'application pendant +4 secondes, vérifier que le porte-seringue est correctement placé et suivre l'étape 1.7-1.11.

CE QRC DOIT ÊTRE LU EN CONJONCTION AVEC L'IFU DU PRODUIT ET LE MANUEL DE LA MACHINE. Pour obtenir les IFU et les manuels, les versions linguistiques des QRC et bien d'autres informations, veuillez consulter notre site web : www.vivostat.com/application-now



CE 0477



Vivostat A/S
Borupvang 2
3450 Allerød
Danemark

+45 8880 8400
info@vivostat.com
www.vivostat.com