




APL 404


# SNELLE REFERENTIEKAART (QRC) SPRAYPEN APPLICATIEKIT - CO-DELIVERY




## DEEL 1 – DE WEGWERPAPPLICATOR EN DE APPLICATOREENHEID VOORBEREIDEN

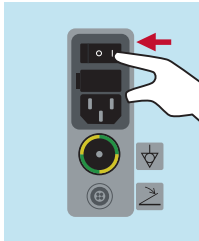


1. Zet de applicatoreenheid AAN en sluit de voetschakelaar aan

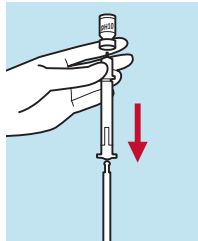


2. Plaats de 21 g naald net in het pH 10-flesje, trek vloeistof op in de 1 ml-injectiespuit\*

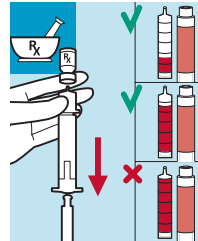


3. Bereid co-delivery oplossing tot minder of gelijk aan sealant/matrix

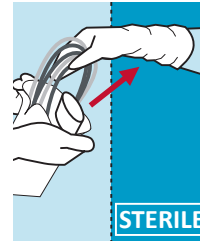


4. Breng de wegwerppapplicator + pHpapier over naar het steriele veld

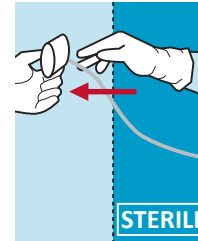


5. Breng de injectiespuithouder buiten het steriele veld

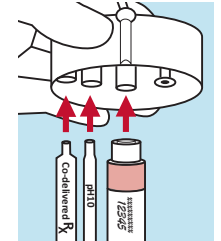


6. Plaats pH 10, sealant/matrix en pH 10 en Co-Delivery oplossing in spuihouder

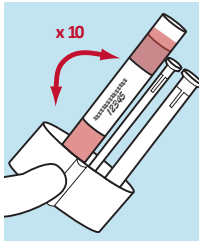

7. Voor matrix: draai de injectiespuithouder 10 keer heen en weer\*

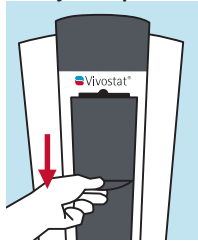


8. Open de beschermkap wanneer dit wordt aangegeven op het display

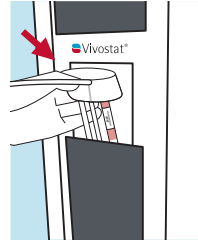


9. Plaats en positioneer de injectiespuithouder

Gebruik van APL 404 zonder co-delivery: zorg ervoor dat de pH10 spuit recht is geplaatst en niet in de co-delivery holte.

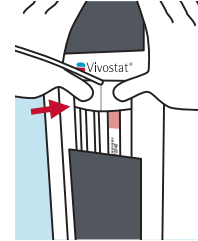


10. Druk de injectiespuithouder in de holte met twee vingers

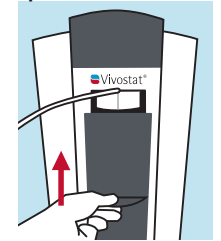

11. Sluit de beschermkap


## DEEL 2 – INJECTIESPUITEN LADEN, VULLEN EN DE APPLICATIE STARTEN

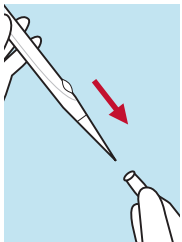


1. Verwijder de dop van de Spraypen




2. Druk op de knop om te starten met het laden van injectiespuiten

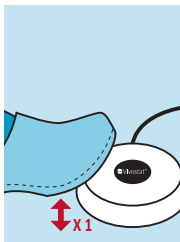

3. Druk **eenmaal** op de voetschakelaar om de spuiten te vullen

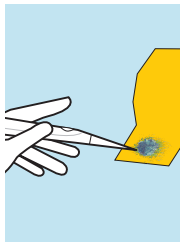


4. Richt de naald naar de onderste hoek van het pHpapier en voer de automatische vulprocedure uit

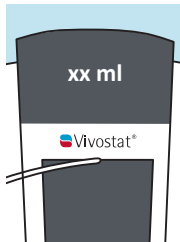

5. De automatische vulprocedure stopt automatisch en ml + spuitmodus wordt eergegeven




6. Controleer het correcte mengsel op pH-papier (van vloeibaar tot viskeus in 10-30 sec.)\*

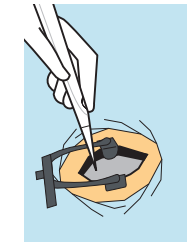


7. Gereed voor applicatie


## AANVULLENDE TIPS VOOR HET AANBRENGEN

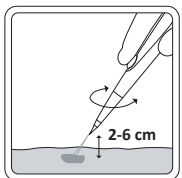


Gebruik cirkelvormige bewegingen op een spuitafstand van 2-6 cm

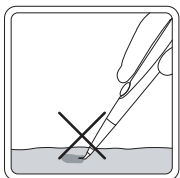


Prik NIET in weefsel en buig de punt van de Spraypen niet

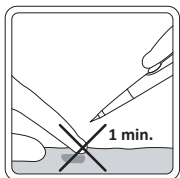

Vermijd het aanraken van de aangebrachte stof onmiddellijk na het aanbrengen

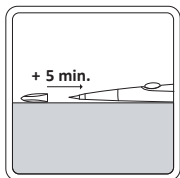

Als het aanbrengen +5 minuten wordt onderbroken, plaatst u de dop op de Spraypen

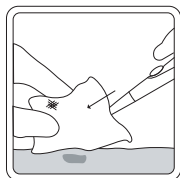

Verwijder de dop en veeg de punt van de Spraypen schoon voordat u de stof opnieuw aanbrengt

## \* LET OP:

1.2: Duw de naald **NIET** tot het uiteinde van de pH 10 flacon om te voorkomen dat luchtballen het mengsel negatief beïnvloeden.

1.7: Volg stap zorgvuldig om te voorkomen dat bloedplaatjes zich op de bodem afzetten. Ze zijn essentieel voor genezing. Als er +30 min. voorbij zijn na het roteren, opnieuw roteren: druk op de knop bovenop de Applicator Unit voor +4 sec., neem de spuihouder eruit, roter en volg stap 1.7-1.11.

2.6: Als het mengsel niet viskeus wordt, druk dan +4 sec. op de knop bovenop de Applicator Unit en controleer of de spuihouder goed geplaatst is en volg stap 1.7-1.11.

DEZE QRC MOET GELEZEN WORDEN IN CONJUNCTIE MET DE IFU VAN HET PRODUCT EN DE MACHINEHANDLEIDING.

Ga voor IFU's en handleidingen, QRC-taalversies en nog veel meer naar onze website: [www.vivostat.com/application-now](http://www.vivostat.com/application-now)



Vivostat A/S  
Borupvang 2  
3450 Alleroed  
Denemarken

+45 8880 8400  
[info@vivostat.com](mailto:info@vivostat.com)  
[www.vivostat.com](http://www.vivostat.com)