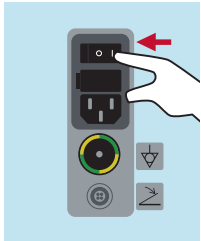
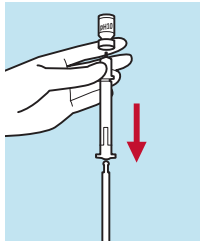
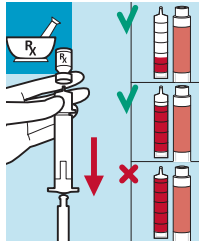
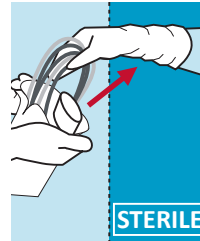
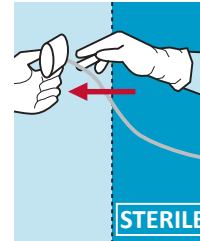
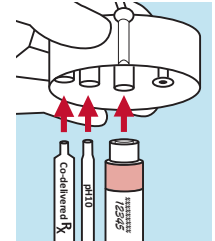
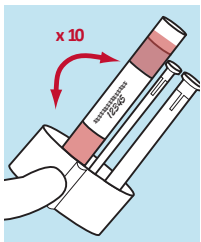
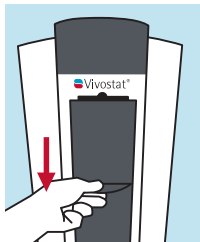
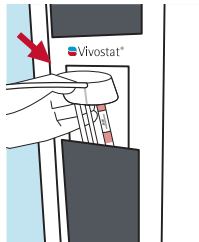
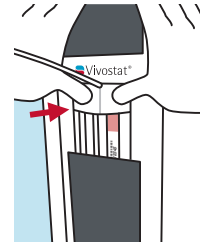
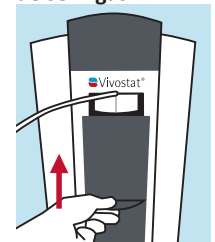
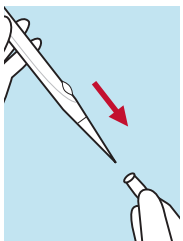
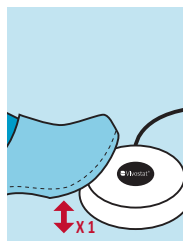
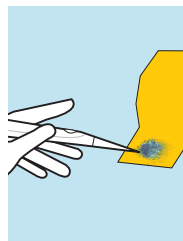
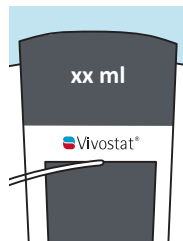
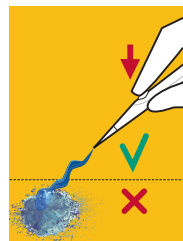
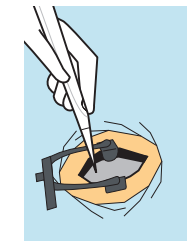
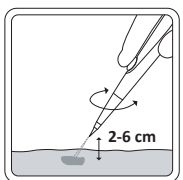
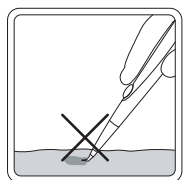
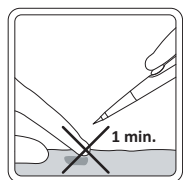
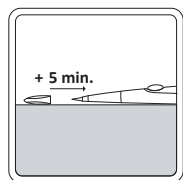
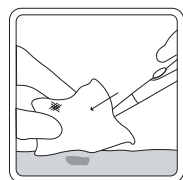


**APL 404****CARTÃO DE CONSULTA RÁPIDA (QRC)
SPRAYPEN KIT DE APLICAÇÃO – CO-DELIVERY****Vivostat®****PARTE 1 – PREPARAR O DISPOSITIVO APLICADOR E A UNIDADE APLICADOR****1. Ligar a unidade e ligar o interruptor do pedal****2. Introduza uma agulha de 21 g no interior do frasco de pH 10; recolha o líquido para uma seringa de 1 ml*****3. Preparar a solução de co-entrega, esta deve ser inferior ou igual à matriz/selante****STERILE****4. Transfira o aplicador descartável + papel de pH para área estéril****STERILE****5. Transfira o suporte de seringa para fora da área estéril****6. Inserir as seringas de pH 10, selante/matriz e de co-entrega no suporte de seringas****7. Para a matriz: rodar o suporte da seringa para a frente e para trás 10 vezes*****8. Quando indicado no visor, abra a tampa****9. Insira e posicione o suporte de seringas****Utilizar o APL 404 sem co-entrega: ter cuidado para que a seringa de pH10 esteja posicionada corretamente e não na cavidade da co-entrega.****10. Pressione o suporte de seringas na cavidade utilizando dois dedos****11. Feche a tampa****PART 2 – CARREGAR SERINGAS, IRRIGAR E INICIAR A APLICAÇÃO****1. Retire a tampa da Spraypen****2. Pressione o botão para iniciar o carregamento de seringas****3. Pressione o interruptor de pedal uma vez para irrigar****4. Aponte para o canto inferior do papel de pH e proceda à autoirrigação****5. Autoirrigação para automaticamente e é exibido o modo de pulverização "ml +"****6. Verifique a mistura correta no papel de pH (de líquida a viscosa em 10-30 segundos)*****7. Pronto para aplicação****DICAS DE APLICAÇÃO****Utilize movimentos circulares a uma distância do spray de 2 a 6 cm****Não introduzam tecido nem dobre a ponta da Spraypen****Evite tocar na substância aplicada imediatamente após a aplicação****Se interromper a aplicação durante mais de 5 minutos, coloque a tampa na Spraypen****Remova a tampa e limpe a ponta da Spraypen antes de reaplicar***** ATENÇÃO:****1.2:** De modo a evitar que bolhas de ar afetem negativamente a mistura, **NÃO** empurre a agulha até ao fim do frasco de pH 10.**1.7:** Siga cuidadosamente o passo para que as plaquetas não se depositem no fundo, pois são essenciais para a cicatrização. Se passarem +30 min. após a rotação, rodar novamente: premir o botão na parte superior da unidade aplicadora durante +4 seg., retirar o suporte da seringa, rodar e seguir os passos 1.7-1.11.**2.6:** Se a mistura não ficar viscosa, premir o botão na parte superior da unidade do aplicador durante +4 seg., verificar se o suporte da seringa está corretamente colocado e seguir o passo 1.7-1.11.**ESTE QRC DEVE SER LIDO EM CONJUNÇÃO COM AS IFU DO PRODUTO E O MANUAL DO UTILIZADOR.**
Para consultar as instruções de utilização e os manuais, as versões linguísticas do QRC e muito mais, visite o nosso sítio Web: www.vivostat.com/application-now**CE**
0477Vivostat A/S
Borupvang 2
3450 Allerød
Dinamarca+45 8880 8400
info@vivostat.com
www.vivostat.com