
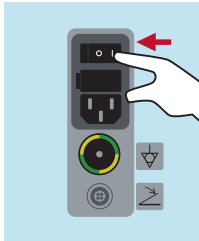


**APL 404**


SNABBREFERENSGUIDE (QRC)

SPRAYPEN APPLIKATIONSSATS – CO-DELIVERY**Vivostat®****DEL 1 – FÖRBERED ENGÅNGSAPPLIKATIONSSATS OCH APPLIKATOR**


1. Slå PÅ enheten och anslut fotpedalen

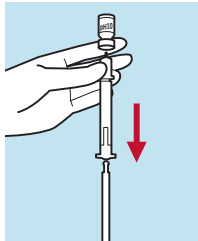


2. Placera 21g nål precis inuti pH 10 flaskan, dra upp vätska i 1 ml spruta*

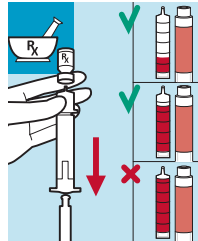


3. Förbered Co-Delivery-lösning till mindre eller lika med fibrinlim/matrix

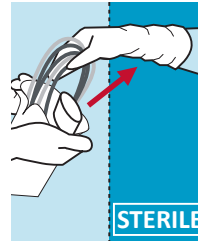


4. Överför engångsapplikator + pH-papper till ett sterilt område

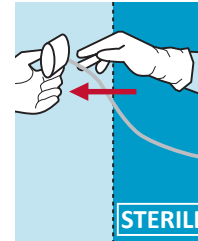


5. Flytta spruthållaren från det sterila området

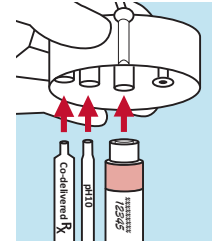


6. Sätt in pH 10-, fibrinlim-/matrix- och co-delivery-sprutor i spruthållaren

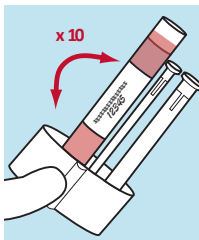

7. För matrix: vrid spruthållaren fram och tillbaka 10 gånger*

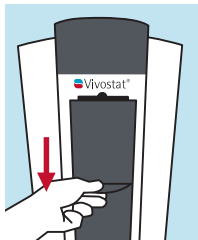


8. Öppna skärmen när det indikeras i displayen

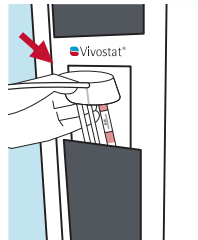


9. Sätt i och placera spruthållaren


Användning av APL 404 utan samleverans: se till att pH10-sprutan är rakt placerad och inte i den simultana samleverans-kaviteten.

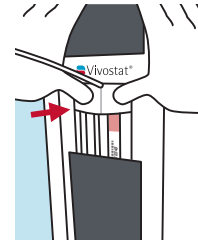

10. Tryck in spruthållaren i håligheten med hjälp av två fingrar

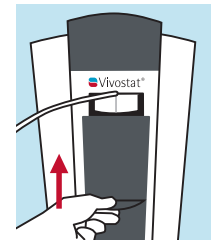


11. Stäng skärmen

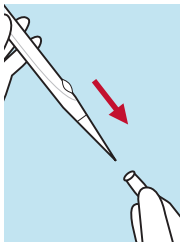DEL 2 – LADDA SPRUTOR, PRIMA OCH INITIERA APPLICERING


1. Ta av locket på Spraypen




2. Tryck på knappen för att börja ladda sprutor

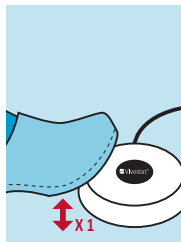

3. Tryck på fotpedalen en gång för att prima

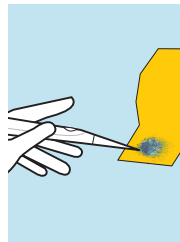


4. Peka på det nedre hörnet av pH-pappret och autoprima

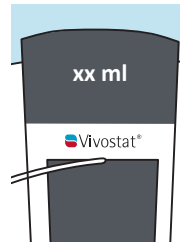


5. Autopriming stoppar automatiskt och ml + sprayläge visas




6. Verifiera korrekt blandning på pH-pappret (från flytande till viskös på 10–30 sek.)*

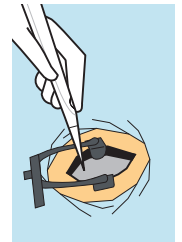


7. Färdig för applicering

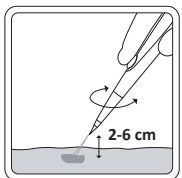YTTERLIGARE TIPS FÖR ANVÄNDNING


Använd cirkulära rörelser med ett avstånd på 2-6 cm

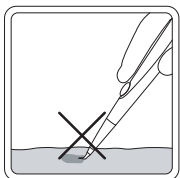


Peta INTE i vävnaden och böj inte spetsen på Spraypen

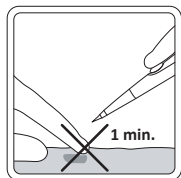

Undvik att röra vid det applicerade ämnet omedelbart efter appliceringen

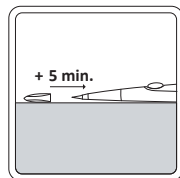

Om du pausar appliceringen i mer än 5 minuter ska du sätta på locket på Spraypen

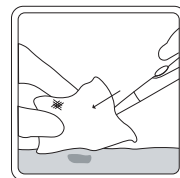

Avlägsna locket och torka av spetsen på Spraypen innan du använder den på nytt

*** FÖRSIKTIGHET:**

1.2: För att undvika att luftbubblor påverkar blandningen negativt ska du **INTE** föra in nålen i slutet av pH 10-flaskan.

1.7: Följ steget noggrant för att blodplättar inte ska sedimentera i botten, de är viktiga för läkning. Om +30 min. passerar efter rotation, rotera igen: tryck på knappen på toppen av applikatornheten i +4 sek, ta ut spruthållaren, rotera och följ steg 1.7-1.11.

2.6: Om blandningen inte blir viskös, tryck på knappen på toppen av applikatornheten i +4 sek. och kontrollera att spruthållaren är korrekt placerad och följ steg 1.7-1.11.

DENNA QRC MÅSTE LÄSAS I SAMBAND MED PRODUKTENS IFU OCH MASKINENS MANUAL.

För IFU:er och manualer, QRC-språkversioner och mycket mer, besök vår webbplats: www.vivostat.com/application-now



CE
0477



Vivostat A/S
Borupvang 2
3450 Allerød
Danmark

+45 8880 8400
info@vivostat.com
www.vivostat.com