



APL 400 Series

Kit de aplicación de Vivostat® Fibrin

Tarjeta de referencia rápida






Las versiones en los idiomas locales están disponibles para su descarga en www.vivostat.com/qrcs

PARTE 1 – PREPARAR EL DISPOSITIVO APLICADOR DESECHABLE Y LA UNIDAD APLICADORA

Encienda la unidad aplicadora en la parte trasera y conecte el pedal

Evite que se formen burbujas en la jeringa

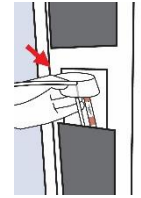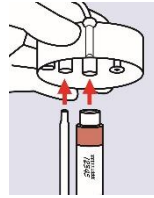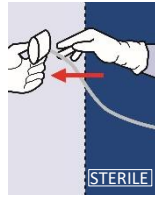

1. Ponga una jeringa de 21 G justo dentro del vial de pH 10 y extraiga líquido al interior de la jeringa de 1 ml



2. Lleve el aplicador desechable y el papel de pH a la zona estéril

3. Saque el soporte de las jeringas de la zona estéril

4. Inserte las jeringas de pH 10 y Vivostat® Fibrin en el soporte de las jeringas

5. Cuando lo indique en la pantalla, abra el protector

6. Inserte y coloque el soporte de las jeringas

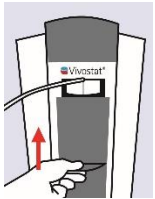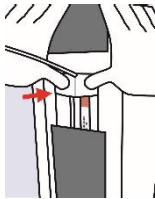


7. Introduzca el soporte de las jeringas en la cavidad utilizando dos dedos

8. Cierre el protector

PRECAUCIÓN:

Para evitar que burbujas de aire perjudiquen la mezcla, **NO** empuje la aguja hasta el extremo del vial de pH 10 en el paso 1


PARTE 2 – CARGAR LAS JERINGAS, CEBARLAS E INICIAR LA APLICACIÓN

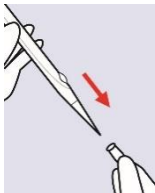


1. Togliere il cappuccio dallo strumento Spraypen




2. Pulse el botón para empezar a cargar las jeringas

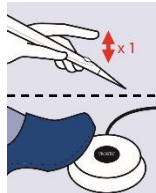

3. Premere il pulsante dello Spraypen oppure il pedale una volta per adescare

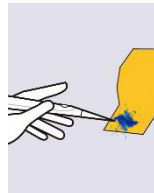


4. Apunte a la esquina inferior del papel de pH e inicie el cebado automático

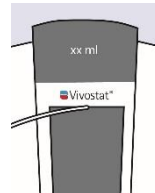

5. El cebado automático se detiene automáticamente y se muestran los ml y el modo de pulverización




La sustancia viscosa puede variar de color
6. Verifique que la mezcla es la correcta en el papel de pH (de líquido a viscoso en 10-30 s)

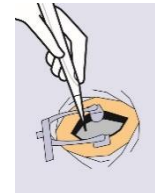


7. Preparado para la aplicación.


CONSEJOS ADICIONALES PARA LA APLICACIÓN

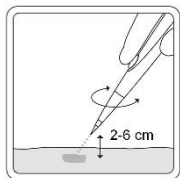


Aplice la pulverización realizando movimientos circulares a una distancia de 2-6 cm

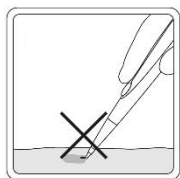


NO haga contacto con el tejido, ya que esto hará que se doble la punta del Spraypen

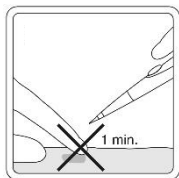

Evite tocar la sustancia aplicada inmediatamente después de la aplicación

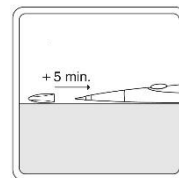

Si vainterrumpir la aplicación más de 5 minutos, póngale la tapa al Spraypen

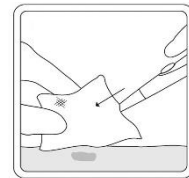

Retire la tapa y limpie la punta del Spraypen antes de reanudar la aplicación